

ACCU-CHEK®

SmartGuide Predict



UPUTE ZA UPORABU

APLIKACIJA ACCU-CHEK SMARTGUIDE PREDICT

Sadržaj

1	O ovom priručniku	3
2	Informacije o proizvodu	4
2.1	Namjena	4
2.2	Indikacije za upotrebu	4
2.3	Predviđeni korisnici	4
2.4	Kontraindikacije	4
2.5	Ograničenja	4
2.6	Edukacija i obuka	4
2.7	Glavne značajke	5
3	Opće sigurnosne informacije	8
4	Korištenje aplikacije	9
4.1	Preduvjeti za korištenje aplikacije	9
4.2	Napomene o izdanju	9
5	Početak	10
5.1	Instaliranje i deinstaliranje aplikacije	10
5.2	Prijava u aplikaciju Predict	10
5.3	Postavljanje aplikacije Accu-Chek SmartGuide	10
6	Konfiguriranje mobilnog uređaja	12
6.1	Opći zahtjevi	12
6.2	Zaštita pristupa	12
7	Početni zaslon	13
7.1	Navigacijski elementi	14
8	Predviđanje glukoze	15
8.1	Greške poruke o predviđanju glukoze	15
8.2	Predviđanje niske glukoze	16
8.3	Iznimke za predviđanje niske glukoze	16
9	Predviđanje niske glukoze tijekom noći	17
9.1	Greške poruke o predviđanju niske glukoze tijekom noći	18
9.2	Omogućavanje predviđanja niske razine glukoze tijekom noći	19
10	Obrasci glukoze	20
10.1	Vrste obrazaca glukoze	20
10.2	Mogući uzroci obrazaca niskih i visokih vrijednosti glukoze	22
10.3	Postavljanje podsjetnika za obrazac glukoze	23
10.4	Dodavanje napomene	23
10.5	Omogućavanje obavijesti za tjedni sažetak	23
11	Izvoz izvješća	24
12	Postavke aplikacije	25
13	Otklanjanje poteškoća	26
13.1	Otklanjanje poteškoća	26
13.2	Pregled obavijesti	26
14	Podrška za korisnike	27
15	Tehnički podaci	28
16	Objašnjenje ikona aplikacije	29
17	Objašnjenje simbola	31

Pažljivo pročitajte upute kako biste se lakše upoznali sa svim funkcijama aplikacije. Ako aplikacija ne radi kako očekujete, pogledajte odjeljak za otklanjanje poteškoća u ovim uputama za uporabu. Ako i dalje ne možete pronaći ono što tražite, obratite se podršci za korisnike.

Ove upute za uporabu na poseban način ističu sljedeće informacije:



UPOZORENJE



UPOZORENJE ukazuje na moguću ozbiljnu opasnost.



MJERA OPREZA



MJERA OPREZA opisuje mjere opreza koje trebate poduzeti kako biste proizvod upotrebljavali sigurno i učinkovito ili kako bi se spriječilo oštećivanje proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA sadrži korisne informacije i savjete.

2.1 Namjena

Aplikacija Accu-Chek® SmartGuide Predict softverska je aplikacija za osobe s dijabetesom koja upotrebljava povezani sustav za kontinuirano mjerenje glukoze (CGM).

Aplikacija Accu-Chek SmartGuide Predict jest:

- alat za upravljanje informacijama koji osobama s dijabetesom pomaže vizualizirati i analizirati svoje podatke o dijabetesu
- namijenjena kao pomoć osobama s dijabetesom u svakodnevnoj kontroli dijabetesa, za upotrebu kod kuće
- popratna aplikacija za aplikaciju Accu-Chek SmartGuide.

2.2 Indikacije za upotrebu

Aplikacija Accu-Chek SmartGuide Predict namijenjena je za svakodnevnu upotrebu kod kuće.

Aplikacija Accu-Chek SmartGuide Predict namijenjena je pregledu prošlih podataka kontinuiranog mjerenja glukoze (CGM) i dobivanju predviđanja budućih vrijednosti CGM-a.

Za pravilan rad ove aplikacije potreban je kompatibilan mobilni uređaj s odgovarajućim postavkama. Za najnovije informacije o kompatibilnim mobilnim uređajima pritisnite <https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>.

2.3 Predviđeni korisnici

Predviđeni korisnici su:

- odrasle osobe u dobi od 18 godina i starije
- osobe s dijabetesom.

2.4 Kontraindikacije

Aplikacija nije namijenjena za upravljanje funkcijama ni za mijenjanje podataka s povezanih uređaja.

Aplikacija nije namijenjena za računanje doza inzulina ni drugih lijekova.

Aplikacija nije namijenjena za zamjenu primarnog zaslona povezanih uređaja (kao što su aparat za mjerenje glukoze u krvi, inzulinske olovke ili podaci CGM-a na odgovarajućoj aplikaciji za CGM).

Pacijenti ne smiju mijenjati svoju terapiju na temelju prikazanih podataka bez prethodnog savjetovanja sa zdravstvenim radnikom.

2.5 Ograničenja

Aplikacija Accu-Chek SmartGuide Predict mora primati vrijednosti CGM-a određene osobe s dijabetesom u stvarnom vremenu.

Nedostaci u prikupljanju podataka CGM-a mogu dovesti do niže učinkovitosti značajki.

2.6 Edukacija i obuka

Ova aplikacija može se upotrebljavati bez prethodne edukacije ili obuke.

2.7 Glavne značajke

Kako bi aplikacija Predict ispravno radila, morate postaviti svoj senzor za CGM. Slijedite korake iz poglavlja Kalibriranje senzora u uputama za uporabu aplikacije Accu-Chek SmartGuide.

Potreban je prijenos neprekidnih podataka CGM-a od najmanje sat vremena kako biste primili početno predviđanje glukoze. Potreban je najmanje 1 dan podataka za predviđanje vjerojatnosti da imate nisku glukozu tijekom noći.

U ovom se odjeljku pruža pregled glavnih funkcija aplikacije:

- Predviđanje glukoze
- Predviđanje niske glukoze
- Predviđanje niske glukoze tijekom noći
- Obrasci glukoze
- Prilagodljive obavijesti
- Izvoz izvješća
- Početni zaslon
- Prijenos podataka
- Bespriječna integracija s aplikacijom Accu-Chek SmartGuide

Predviđanje glukoze

Aplikacija Predict prikuplja i upotrebljava informacije iz aplikacije Accu-Chek SmartGuide.

Vaše predviđanje glukoze za sljedeća 2 sata prikazuje se nakon što ispravno postavite svoj senzor za CGM i preneseno je najmanje sat vremena neprekidnih podataka CGM-a iz aplikacije Accu-Chek SmartGuide u ovu aplikaciju.

Više informacija o ovoj značajki potražite u poglavlju Predviđanje glukoze.

Predviđanje niske glukoze

Aplikacija otkriva i obavještava vas o mogućoj niskoj glukozu unutar 30 minuta. Prema zadanim vrijednostima obavijest *Niska razina glukoze uskoro!* koju primite već je uključena kada prvi put otvorite ovu aplikaciju. Možete otići na **Postavke obavijesti** s opcije **Izbornik** da biste je isključili. Kartica Predviđanje niske glukoze i dalje će biti prikazana na početnom zaslonu aplikacije.

Obavijest *Niska razina glukoze uskoro!* prikazuje se na vašem zaslonu zaključavanja ili kada prijedete prstom prema dolje s vrha bilo kojeg drugog zaslona. Dodirnite obavijest kako biste dobili više pojedinosti i radnji koje po izboru možete poduzeti.

Funkcija predviđanja niske razine glukoze funkcionira samo ako je alarm za nisku razinu glukoze postavljen na vrijednosti između 60 mg/dL (3,3 mmol/L) i 100 mg/dL (5,5 mmol/L) u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide. Ova obavijest ne radi kada je alarm niske razine glukoze postavljen iznad 100 mg/dL (5,5 mmol/L).

Više informacija o ovoj obavijesti potražite u poglavlju Predviđanje glukoze.

Predviđanje niske glukoze tijekom noći

Ovom značajkom predviđaju se vaše vjerojatnosti da imate nisku glukozu tijekom noći, što vam omogućuje odlučiti koje radnje poduzeti prije nego što odete spavati.

Pad razine znači da bi vaša vrijednost glukoze mogla pasti ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L).

Ako omogućite tu značajku i uključite obavijest, možete primiti obavijest *Predviđena je niska glukozu tijekom noći!* ako postoji velika vjerojatnost da imate nisku glukozu dok spavate.

Aplikaciji Predict treba najmanje 1 dan podataka kako bi se predviđela vjerojatnost.

Možete postaviti i značajku Predviđanje niske glukoze tijekom noći i ručno zatražiti izračun.

Više informacija o niskim razinama glukoze tijekom noći potražite u poglavlju Predviđanje niske glukoze tijekom noći.

Obrasci glukoze

Ovom značajkom identificiraju se ponavljajući glikemijski događaji koji se odvijaju tijekom dana ili tjedna (pon. – ned.). Ona vam omogućuje da poduzmete provedive korake kako bi vaša razina glukoze bila unutar raspona.

Kad aplikacija Predict primi podatke CGM-a iz aplikacije Accu-Chek SmartGuide, otkriveni obrasci iz posljednja 24 sata prikazuju se ispod grafikona na početnom zaslonu.

Obrasci se prikazuju prema redoslijedu u kojem je na prvom mjestu na vrhu obrazac s najvećim zdravstvenim rizikom, kao što je obrazac vrlo niske glukoze ili niske glukoze. Osim toga, možete postaviti podsjetnike na bilo koji od svojih otkrivenih obrazaca.

Sažetak obrazaca dobivate svaki ponedjeljak. Vi odlučujete želite li primiti obavijest kada taj sažetak bude dostupan.

Na kartici Aktualno na zaslonu Obrasci glukoze

- Pregledajte sve obrasce koji su otkriveni u posljednja 2 tjedna (od ponedjeljka prošlog tjedna do trenutne vremenske oznake). Također možete vidjeti za koje su obrasce postavljene podsjetnici.
- Dodirnite otkriveni obrazac kako biste vidjeli više informacija, uključujući sve povezane unose ugljikohidrata, inzulina i rezultata mjerenja glukoze u krvi u dnevniku aplikacije Accu-Chek SmartGuide. Dodirnite jedan dan za obrazac da biste vidjeli pojedinosti i informacije iz dnevnika za taj dan.
- Postavite da primite obavijest kada sažetak prošlog tjedna bude dostupan.

Na kartici Prošlo na zaslonu Obrasci glukoze

- Pogledajte one obrasce koji se više ne otkrivaju, navedene tako da je na prvom mjestu posljednji mjesec. Prošli obrasci stariji od 2 tjedna pohranjuju se zasebno do 6 mjeseci.

Više informacija o obrascima potražite u poglavlju Obrasci glukoze.

Prilagodljive obavijesti

Postavite obavijesti za svoje vjerojatnosti da imate nisku glukozu tijekom noći i za tjedni sažetak obrazaca. Obavijest da ćete imati nisku glukozu unutar 30 minuta uključena je prema zadanim postavkama. Prilagodljiva značajka obavijesti pomaže vam da namjestite rad sustava prema svojim osobnim potrebama i željama.

Opciji **Postavke obavijesti** možete pristupiti s opcije **Izbornik**. Ako imate problema, možete provjeriti i radne postavke svojeg mobilnog uređaja. Obavijesti moraju biti uključene.

Izvoz izvješća

Odaberite dvotjedno razdoblje za koje želite izvesti podatke za svoje obrasce i/ili izvješće o ambulatornom profilu glukoze (AGP). Analiziranje izvješća omogućuje vam da bolje razumijete svoj prošli ukupni glikemijski status. Posjedovanje tih povijesnih informacija o glukozu pomaže vam u boljem upravljanju razinama glukoze u budućnosti. Osim toga, izvješće možete jednostavno podijeliti sa svojim zdravstvenim radnikom.

Dodatne informacije o generiranju tog izvješća potražite u poglavlju Izvoz izvješća.

Početni zaslon

Pregledajte sve svoje podatke jednim pogledom. Svi relevantni podaci, kao što su vaša prošla i posljednja vrijednost glukoze i vaše predviđanje glukoze, prikazuju se na grafikonu.

Vaše kartice Predviđanje niske glukoze tijekom noći i Predviđanje niske glukoze te otkriveni obrasci iz posljednja 24 sata prikazuju se ispod grafikona na početnom zaslonu. Imajte na umu da se obavijest *Niska razina glukoze uskoro!* prikazuje samo ako postoji visok rizik od niske glukoze. Obavijest *Niska razina glukoze uskoro!* prvo će se pojaviti na vašem zaslonu

zaključavanja. Prema zadanim postavkama ta je obavijest već uključena kada prvi put otvorite ovu aplikaciju.

Dodatne informacije o ovom zaslonu i navigacijskim elementima u aplikaciji potražite u poglavlju Početni zaslon.

Prijenos podataka

Aplikacija Predict prenosi sve vaše podatke o dijabetesu pohranjene u aplikaciji na račun za Accu-Chek. Potrebna je internetska veza.

Besprijeckorna integracija s aplikacijom Accu-Chek SmartGuide

Budući da aplikacija Accu-Chek SmartGuide i aplikacija Predict dijele podatke o dijabetesu, možete izravno iz te aplikacije otići u aplikaciju Accu-Chek SmartGuide. Jednostavno pritisnite ikonu aplikacije Accu-Chek SmartGuide u gornjem desnom kutu početnog zaslona. Također možete dodirnuti ikonu aplikacije Predict na početnom zaslonu aplikacije Accu-Chek SmartGuide kako biste se vratili natrag na aplikaciju Predict.

Dodatne informacije o tome kako to funkcionira potražite u odjeljku Postavljanje aplikacije Accu-Chek SmartGuide.

 MJERA OPREZA**Opasnost od ozbiljnih ozljeda**

Savjetujemo vam da ne mijenjate svoju cjelokupnu terapiju, kao što su faktori inzulina-ugljikohidrata, shema inzulina ili intenzitet vježbanja, na temelju prikazanih podataka, bez prethodnog savjetovanja sa zdravstvenim radnikom. Ako imate pitanja o svojoj rutinskoj terapiji, obratite se zdravstvenom radniku.

U slučaju bilo kakvih neočekivanih vrijednosti glukoze, prije nego razgovarate o promjenama terapije sa zdravstvenim radnikom, preporučuje se da učinite sljedeće:

- Usporedite vrijednosti glukoze prikazane u ovoj aplikaciji s izvornim vrijednostima glukoze aplikacije Accu-Chek SmartGuide.
- Ako ste i dalje u nedoumici, izvršite mjerenje glukoze u krvi svojim aparatom za mjerenje glukoze u krvi.
- Ako i dalje niste sigurni u vezi s razinama glukoze prikazane u aplikacijama, obratite se zdravstvenom radniku.

Aplikacija Predict daje predviđanja na temelju podataka CGM-a i unosa u dnevniku (ugljikohidrati i inzulin). Sve radnje koje biste mogli poduzeti u sljedeća dva sata (kao što je konzumacija obroka, uzimanje inzulina i vježbanje) nisu uključene u predviđanje. Imajte na umu da je predviđanje za značajku Predviđanje niske glukoze tijekom noći dulje od 2 sata jer pokriva noć.

4.1 Preduvjeti za korištenje aplikacije

Potrebni računi

- Za preuzimanje aplikacije na uređajima s operacijskim sustavom iOS potreban vam je Apple ID.
- Za preuzimanje aplikacije na uređajima s operacijskim sustavom Android potreban vam je Google račun.
- Za postavljanje aplikacije potreban vam je Accu-Chek račun.
- Za stvaranje Accu-Chek računa potrebna vam je osobna adresa e-pošte.

Zahtjevi sustava

Aplikacijom se možete koristiti samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

- Morate upotrebljavati senzor za CGM i aplikaciju Accu-Chek SmartGuide.
- Morate biti povezani s internetom da biste primali predviđanja glukoze i obavijesti aplikacije.
- Verzija sustava iOS za aplikaciju mora biti iOS 15.3 ili novija.
- Verzija sustava Android za aplikaciju mora biti Android 11 ili novija.

Prije ažuriranja mobilnog uređaja na noviju verziju operacijskog sustava, provjerite je li aplikacija kompatibilna s novom verzijom operacijskog sustava. Ako niste sigurni, provjerite popis kompatibilnih uređaja: <https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se podršci za korisnike.

Preporučuje se da ažurirate svoju aplikaciju i/ili operativni sustav mobilnog uređaja čim vam ažuriranje postane dostupno.

Mrežni zahtjevi

Aplikacija zahtijeva sljedeća dopuštenja:

- Osigurajte internetsku vezu za dijeljenje podataka s vašim računom za Accu-Chek i oblakom platforme Roche Diabetes Care. Povežite svoj mobilni uređaj samo s poznatom, pouzdanom i sigurnom Wi-Fi® i mobilnom mrežom.

Zahtjevi za preglednik

Potreban vam je preglednik da biste stvorili Accu-Chek račun i prijavili se u aplikaciju. Ako već nemate instaliran preglednik, najprije ga morate preuzeti.

Ova je aplikacija kompatibilna sa sljedećim preglednicima na uređajima sa sustavom Android:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Mozilla Firefox Focus
- Microsoft Edge
- Samsung Internet

Ova je aplikacija kompatibilna s preglednikom Safari na uređajima sa sustavom iOS.

4.2 Napomene o izdanju

Posjetite App Store ili Google Play za najnovije napomene o izdanju aplikacije.

5.1 Instaliranje i deinstaliranje aplikacije

Instaliranje aplikacije

Najprije morate preuzeti aplikaciju na mobilni uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa sljedećih platformi za digitalnu distribuciju:

- App Store za korisnike sustave iOS
- Google Play za korisnike sustava Android

Preuzmite aplikaciju i instalirajte je na mobilni uređaj. Informacije o tome kako instalirati aplikacije na mobilni uređaj nalaze se u uputama za uporabu vašeg mobilnog uređaja kao i u trgovini App Store ili Google Play.

Deinstaliranje aplikacije

Informacije o tome kako deinstalirati aplikacije na mobilni uređaj nalaze se u uputama za uporabu vašeg mobilnog uređaja kao i u trgovini App Store ili Google Play.

5.2 Prijava u aplikaciju Predict

Nakon što preuzmete i instalirate aplikaciju, spremni ste za otvaranje aplikacije i prijavu.

Potreban vam je preglednik da biste se prijavili u aplikaciju. Ako već nemate instaliran preglednik, najprije ga morate preuzeti.

- 1 Pritisnite ikonu aplikacije.
- 2 Prikazuju se uvodni zasloni. Povucite prstom ulijevo za prikaz zaslona.
- 3 Prijavite se u aplikaciju istim korisničkim imenom i lozinkom kao za svoj račun za Accu-Chek.
- 4 Nimate račun za Accu-Chek? Dodirnite Stvori račun i slijedite upute na zaslonu.

5.3 Postavljanje aplikacije Accu-Chek SmartGuide

Ako je aplikacija Accu-Chek SmartGuide postavljena, aplikacija Predict automatski prima podatke CGM-a.

Ako je prijenos podataka uspješan, dolazite na početni zaslon. Pristupite područjima aplikacije s donje navigacije.

Aplikacija Accu-Chek SmartGuide nije instalirana?

Dodirnite **Idi u aplikaciju** i bit ćete preusmjereni na svoju trgovinu s aplikacijama. Možete i dodirnuti ikonu aplikacije Accu-Chek SmartGuide u gornjem desnom kutu početnog zaslona.

Vaš senzor još nije uparen?

- Dodirnite **Idi u aplikaciju** i otvorit će se aplikacija Accu-Chek SmartGuide. Slijedite upute za uparivanje senzora.
- Aplikacija Predict mora imati redovito ažurirane vrijednosti glukoze kako bi pružila najtočnije predviđanje. Dodirnite **Sinkroniziraj sada** kako biste prenijeli podatke CGM-a.

Aplikacija je instalirana i povezana, no nešto nije u redu?

- Morate biti prijavljeni u svoj račun za Accu-Chek.
Ako se odjavite, nećete primati vrijednosti glukoze ni obavijesti. Upotrebljavajte iste vjerodajnice za prijavu na račun za Accu-Chek za pristup aplikaciji Accu-Chek SmartGuide i aplikaciji Predict.
- Nema dovoljno podataka.
Provjerite rade li senzor za CGM i aplikacija Accu-Chek SmartGuide ispravno. Potreban je prijenos od najmanje jednog sata neprekidnih podataka CGM-a kako bi aplikacija Predict mogla pružiti početna predviđanja glukoze za sljedeća 2 sata.
- Vrijeme je za promjenu senzora.
Vratite se u aplikaciju Accu-Chek SmartGuide i slijedite upute za zamjenu senzora.
- Podaci CGM-a nisu dostupni.
Podaci se ne prikazuju u grafikonu na početnom zaslonu. Vratite se u aplikaciju Accu-Chek SmartGuide za otklanjanje poteškoća. Dodirnite ikonu aplikacije Accu-Chek SmartGuide u gornjem desnom kutu početnog zaslona.

6.1 Opći zahtjevi

Održavanje uređaja

Nemojte se koristiti aplikacijom na mobilnom uređaju koji ima napuknut ili oštećen zaslon. Ako je zaslon napuknut ili oštećen, možda nećete moći vidjeti sve prikazane informacije.

Aplikacijom se morate koristiti samo na ispravnom mobilnom uređaju.

6.2 Zaštita pristupa

Zaštita podataka

Zaštitite podatke u aplikaciji od nepoznatog pristupa ili zlouporabe. Iskoristite sigurnosne funkcije koje su dostupne u vašem mobilnom uređaju ili operacijskom sustavu, kao što je zaštita lozinkom.

Svi vaši podaci o dijabetesu također su šifrirani i zaštićeni u vašem Accu-Chek računu u oblaku Roche Diabetes Care.

Za informacije o tome kako Roche prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke:

- Dodirnite **Izbornik > Račun > Postavke privatnosti**.
- Dodirnite **Izbornik > Račun > Upravljanje računom**.

Zaštita mobilnog uređaja

Zaštitite aplikaciju od pristupa neovlašćenih osoba. Dopustite pristup samo njegovateljima kojima vjerujete.

- Nemojte posuđivati svoj mobilni uređaj drugim osobama, uključujući djecu.
- Postavite zaključavanje zaslona u postavkama sigurnosti mobilnog uređaja.
- Konfigurirajte zaključavanje zaslona kako bi se mobilni uređaj automatski zaključao nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

Zaštita računa


Zaštitite podatke svog Accu-Chek računa od neželjenog pristupa. Nemojte dijeliti podatke o svom računu s drugim osobama, osim ako se radi o vašim njegovateljima.

Zaštitite svoj mobilni uređaj od izmjena softvera. Osigurajte da je za instalacije iz trgovine s aplikacijama (primjerice, App Store ili Google Play) potrebna lozinka.

Za informacije o promjeni postavki lozinke vašeg Apple ili Google računa pogledajte upute za svoju platformu za preuzimanje.

Kako biste promijenili postavke lozinke za svoj Accu-Chek račun, idite na **Izbornik > Račun > Upravljanje računom**.

Više informacija o konfiguriranju mobilnog uređaja potražite u poglavlju Konfiguriranje mobilnog uređaja u uputama za uporabu aplikacije Accu-Chek SmartGuide.

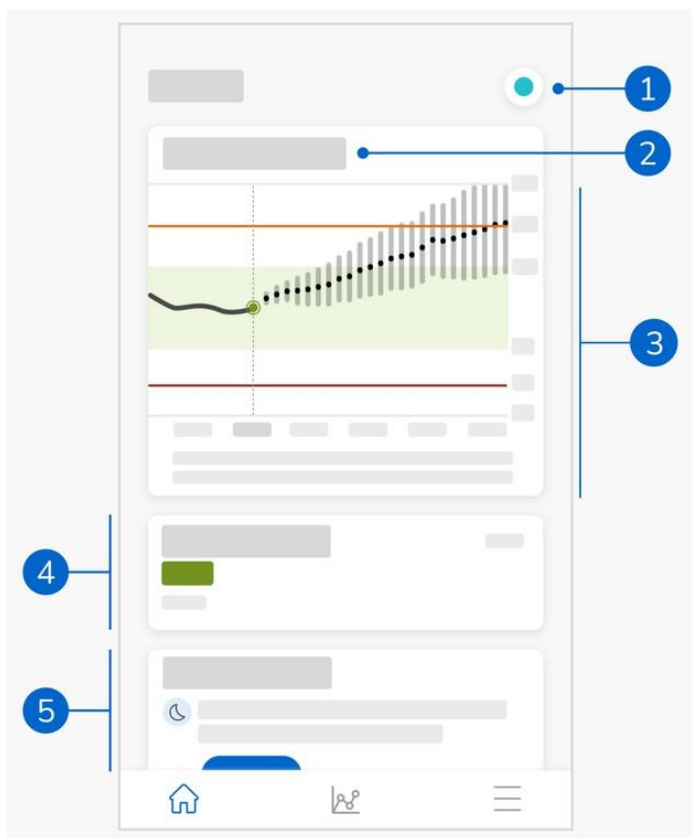

Početni zaslon središte je aplikacije i podijeljen je u 5 odjeljaka. Na tom zadanom zaslonu prikazuje se sljedeće:

- 1 Ikona aplikacije Accu-Chek SmartGuide: pritisnite ovu ikonu da biste prešli na početni zaslon aplikacije Accu-Chek SmartGuide. Aplikacija Predict ostaje otvorena.
- 2 Dodirnite ikonu ⓘ kako biste saznali više o tome kako se na grafikonu prikazuje vaše predviđanje glukoze.
- 3 Na grafikonu se prikazuju vaše razine glukoze tijekom prethodnog sata, kakve su sada i njihov predviđeni raspon za sljedeća 2 sata. Istočnija linija u predviđenom rasponu predstavlja vašu predviđenu prosječnu vrijednost glukoze.
Točnost vašeg predviđenog raspona glukoze smanjuje se što je dalje vremenski, kao što se prikazuje na širećim okomitim trakama.
Ako primite poruke o pogreškama predviđanja, prikazat će se u području grafikona.
- 4 Aktualna razina glukoze u odgovarajućoj mjernoj jedinici.
- 5 Područje poruke: važne informacije, kao što je vjerojatnost pojave niske glukoze tijekom noći i niske glukoze, u roku od 30 minuta prikazat će se ovdje odmah ispod grafikona.
Ako aplikacija otkrije bilo kakve obrasce u vašim razinama glukoze, obrasci se također prikazuju ovdje.

7.1 Navigacijski elementi

U gornjem dijelu zaslona prikazani su sljedeći elementi navigacije.

- Pritisnite < za povratak na prethodni zaslon.
- Dodirnite ✕ za zatvaranje zaslona.

U donjem dijelu zaslona prikazani su sljedeći elementi navigacije.



Ikone su istaknute plavom bojom kako bi se označilo područje aplikacije koje gledate.

- 1 Ikona **Početno**: pritisnite za pristup početnom zaslonu.
- 2 Ikona **Obrasci**: pritisnite da biste pristupili zaslonu s uzorcima glukoze.
- 3 Ikona **Izbornik**: pritisnite za prikaz dodatnih opcija izbornika. Opcije uključuju Veze, Račun, Postavke obavijesti, Izvoz izvješća, Upute za uporabu, Informacije o proizvodu i Obratite nam se.

Aplikacija predviđa kakva bi vaša razina glukoze mogla biti u sljedeća 2 sata. To predviđanje temelji se na vašim prošlim vrijednostima CGM-a i vašim unosima ugljikohidrata i inzulina u dnevniku aplikacije Accu-Chek SmartGuide.

Predviđanje glukoze prikazuje se na grafikonu na početnom zaslonu kada se najmanje jedan sat neprekidnih podataka CGM-a uspješno prenese u aplikaciju.

Na grafikonu se prikazuju vaše razine glukoze tijekom prethodnog sata, kakve su sada i njihov predviđeni raspon za sljedeća 2 sata. Istočkana linija u predviđenom rasponu predstavlja vašu predviđenu prosječnu vrijednost glukoze.

Točnost vašeg predviđenog raspona glukoze smanjuje se što je dalje vremenski, kao što se prikazuje na širećim okomitim trakama.

Imajte na umu da su prikazane vrijednosti glukoze u budućnosti predviđanja koja se mogu razlikovati od stvarnih vrijednosti i na njih ne utječe trenutačno stanje načina rada za trendove ili načina rada za liječenje u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide. Način rada za trendove pokazuje da bi se prikazane vrijednosti u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide trebale upotrebljavati samo za prikaz trendova i kao opća referenca. Za donošenje odluka o liječenju mogu se upotrebljavati samo vrijednosti prikazane u načinu rada za liječenje.

Raspon se prikazuje na grafikonu od 0 do 300 mg/dL (0 - 16,7 mmol/L). Ako je vaša vrijednost iznad 300 mg/dL (16,7 mmol/L), bit će označena trokuticom okrenutim prema gore, a u aplikaciji će se prikazivati HI umjesto brojčane vrijednosti ako je vaša vrijednost iznad 400 mg/dL (22 mmol/L). Ako je vaša vrijednost niska, ispod 40 mg/dL (2,2 mmol/L), bit će označena trokuticom okrenutim prema dolje, a u aplikaciji će se prikazivati LO umjesto brojčane vrijednosti.

Ako se vaša predviđena razina glukoze kreće prema niskoj vrijednosti i ako se pojavi kartica Predviđanje niske glukoze, na grafikonu se prikazuju samo vrijednosti glukoze do sljedećih 30 minuta. Ako vaša predviđena razina glukoze ne dosegne nisku razinu unutar 30 minuta, na grafikonu se ne prikazuju vrijednosti predviđanja i pojavljuje se samo kartica Predviđanje niske glukoze.

Imajte na umu sljedeće kada gledate svoje predviđanje:

- Aplikacija Predict daje predviđanja na temelju podataka CGM-a i unosa ugljikohidrata i inzulina u dnevniku. Sve radnje koje biste mogli poduzeti u sljedeća dva sata (kao što je konzumacija obroka, uzimanje inzulina i vježbanje) nisu uključene u predviđanje.
- Dvosatno predviđanje služi samo za informativne svrhe u slučajevima kada se predviđanje odnosi na više od 45 minuta i kako biste bili svjesni budućih radnji koje ćete možda morati poduzeti (kao što je češće provjeravanje glukoze, pripremanje injekcija inzulina ili osiguravanje dostupnosti ugljikohidrata). U slučajevima predviđanja visoke i niske glukoze u sljedećih 45 minuta trebali biste razmotriti koje ćete radnje morati poduzeti.

8.1 Greške poruke o predviđanju glukoze

Primit ćete jednu od sljedećih poruka o pogrešci ako na vašem početnom zaslonu nema predviđanja glukoze.

Poruka o pogrešci	Radnja
Treba nam najmanje 1 sat podataka CGM-a da predvidimo vašu razinu glukoze.	Pričekajte 1 sat da se pojavi predviđanje glukoze.
Ne možemo predvidjeti vašu razinu glukoze dok je ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L).	Ne možemo dati predviđanje dok je vaša razina glukoze niska. Da biste podigli razinu glukoze iznad 70 mg/dL (3,9 mmol/L), pojedite ili popijte nešto slatko prema preporuci zdravstvenog radnika. (Ova je vrijednost samo primjer. Vaša granična vrijednost

	niske glukoze može se razlikovati.)
Nije moguće predvidjeti vašu razinu glukoze. Pokušajte ponovno kasnije.	Nije bilo moguće predvidjeti vašu razinu glukoze. Pokušajte ponovno kasnije. Ako se pogreška stalno javlja, obratite se podršci za korisnike.

8.2 Predviđanje niske glukoze

Na početnom zaslonu prikazuje se kartica Predviđanje niske glukoze kada aplikacija otkrije da ćete imati nisku razinu glukoze unutar 30 minuta. Niska razina glukoze može se pojaviti bilo kada u sljedećih 30 minuta.

Pad razine znači da vrijednost glukoze može pasti ispod granice niske razine glukoze koju ste postavili za svoje alarme za glukozu u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide. Dodatne informacije o postavljanju graničnih vrijednosti glukoze potražite u poglavlju Početak u uputama za uporabu za aplikaciju Accu-Chek SmartGuide.

Ako postoji velika vjerojatnost da će pasti na nisku razinu u roku od 30 minuta i uključene su vam obavijesti, obavijest *Niska razina glukoze uskoro!* prikazuje se ili na vašem zaslonu zaključavanja ili kada prijedete prstom od vrha zaslona prema dolje, ovisno o tome kako ste konfigurirali mobilni uređaj.

Pritisnite obavijest *Niska razina glukoze uskoro!* kako biste dobili dodatne informacije na zaslonu Predviđanje niske glukoze. Pročitajte preporuke i odlučite što poduzeti sljedeće.

8.3 Iznimke za predviđanje niske glukoze

Značajka Predviđanje niske glukoze aktivna je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uz sljedeće iznimke:

- Alarm niske razine glukoze postavljen je na vrijednosti ispod 60 mg/dL (3,3 mmol/L) ili iznad 100 mg/dL (5,5 mmol/L) u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide. Ova obavijest ne radi kada je vaš alarm niske razine glukoze postavljen iznad 100 mg/dL (5,5 mmol/L).
- prošlo je 20 minuta od vaše posljednje konzumacije ugljikohidrata
- prošlo je 30 minuta od posljednjeg predviđanja i obavijesti
- Vrijednost glukoze već vam je ispod granice niske glukoze koju ste postavili za svoje alarme za glukozu u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide. Dodatne informacije o postavljanju graničnih vrijednosti glukoze potražite u poglavlju Početak u uputama za uporabu za aplikaciju Accu-Chek SmartGuide.

Kartica Predviđanje niske glukoze na početnom zaslonu nestaje nakon 15 minuta.

Značajka Predviđanje niske glukoze tijekom noći daje vam do znanja, prije odlaska na spavanje, vjerojatnost da imate nisku glukozu tijekom noći, a pruža i vremensko razdoblje tijekom kojeg će se rizik od niske razine najvjerojatnije pojaviti. Predviđanje je dostupno od 21 h do 2 h.

Pad razine znači da bi vaša vrijednost glukoze mogla pasti ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L). Značajka Predviđanje niske glukoze tijekom noći funkcionira s fiksnim niskim pragom od 70 mg/dL (3,9 mmol/L) koji ne ovisi o aplikaciji Accu-Chek SmartGuide.

Noć se definira kao vremensko razdoblje od 7 sati koje se računa od vremena izračuna predviđanja.

Možete postaviti značajku Predviđanje niske glukoze tijekom noći i ručno zatražiti novi izračun za bilo koje razdoblje između 21 h i 2 h. Također možete biti obaviješteni u odabrano vrijeme visokog rizika (znatno iznad vašeg uobičajenog rizika).

Ako postoji velika vjerojatnost da ćete imati nisku glukozu tijekom noći, a obavijesti su uključene, obavijest *Predviđena je niska glukoza tijekom noći!* pojavit će se na zaslonu zaključavanja vašeg mobilnog uređaja. Kartica Predviđanje niske glukoze tijekom noći može se vidjeti ispod grafikona na početnom zaslonu ove aplikacije. Idite na **Izbornik > Postavke obavijesti** za upravljanje ovom obaviješću.

Dodirnite obavijest ili karticu kako biste vidjeli grafičko predviđanje na zaslonu Predviđanje niske glukoze tijekom noći.

Vjerojatnost niske glukoze tijekom noći podijeljena je na tri različite razine rizika, s različitim bojama koje predstavljaju svaku razinu:

- Uobičajena – manje od 30 % (zeleno)
- Visoka – između 30 % i 60 % (žuto)
- Vrlo visoka – iznad 60 % (crveno)



Bez obzira na to je li vjerojatnost da imate nisku glukozu tijekom noći uobičajena, visoka ili vrlo visoka, razmislite koje ćete radnje poduzeti.

Čak je i uobičajen rizik i dalje rizik, stoga treba razmotriti sve potrebne radnje.

Na zaslonu Predviđanje niske glukoze tijekom noći također se prikazuju sljedeće preporuke kada postoji velika ili vrlo velika vjerojatnost niske glukoze tijekom noći:

- Držite grickalice s ugljikohidratima nadohvat ruke pored kreveta.
- Razmislite o ubrizgavanju manje jedinica bazalnog inzulina tijekom noći.
- Konzumirajte hranu bogatu proteinima ili masnoćama.

Možete ručno zatražiti izračun vjerojatnosti da imate nisku glukozu svakih 20 minuta, pod uvjetom da je prošlo 20 minuta nakon posljednjeg obroka i/ili injekcije inzulina, uz sljedeće iznimke:

- Vrijednost glukoze već vam je ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L) ili ispod granice niske glukoze (ako je iznad 70 mg/dL (3,9 mmol/L)).
- Vaše predviđanje glukoze ili kartica Predviđanje niske glukoze pokazala je da ćete pasti ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L). Vaša stvarna vrijednost glukoze može se razlikovati od

vrijednosti glukoze prikazane ovdje jer se ta vrijednost temelji na granici niske glukoze koju ste postavili za svoje alarme za glukozu u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide.

9.1 Greške poruke o predviđanju niske glukoze tijekom noći

Kada se ne može pružiti predviđanje niske glukoze tijekom noći, pročitajte tekst u nastavku kako biste bolje razumjeli zašto i koje moguće radnje poduzeti. Vaše vrijednosti glukoze mogu se razlikovati od onoga što je ovdje prikazano.

Poruka o pogreški	Radnja
Došlo je do problema	Usluga je možda nedostupna. Ako opcija Pokušaj ponovno ne uspije, pričekajte nekoliko minuta. Ako se pogreška stalno javlja, obratite se podršci za korisnike.
Još nije dostupno	Prerano je za predviđanje niske glukoze tijekom noći. Morate ponovno pokušati između 21 h i 2 h. Značajka Predviđanje niske glukoze tijekom noći funkcionira samo tijekom tog vremenskog razdoblja.
Nema dovoljno podataka	Obavezno nosite senzor za CGM najmanje 1 dan. Trebamo najmanje 1 dan podataka za predviđanje vjerojatnosti da imate nisku glukozu tijekom noći.
Otkriven unos ugljikohidrata ili inzulina	Ako je napravljen unos ugljikohidrata ili inzulina u dnevnik aplikacije Accu-Chek SmartGuide, tada ovoj aplikaciji treba najmanje 20 minuta da analizira novi unos i ponovno izračuna vjerojatnost niske glukoze tijekom noći.
Uskoro će doći do pada razine glukoze	Ova se poruka prikazuje ako vaše predviđanje glukoze ili kartica Predviđanje niske glukoze ukazuje na to da će vaša vrijednost glukoze pasti ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L). (Ova je vrijednost samo primjer. Vaša granična vrijednost niske glukoze može se razlikovati.)
Vrijednost je ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L)	Ova aplikacija ne može predvidjeti nisku glukozu kada je vaša razina glukoze već niska. Pojedite ili popijte nešto slatko prema preporuci zdravstvenog radnika. (Ova je vrijednost samo primjer. Vaša granična vrijednost niske glukoze može se razlikovati.)
Došlo je do problema	Nismo mogli predvidjeti vašu glukozu kada ste pokušali izračunati rizik. Pokušajte ponovno kasnije.
Jeste li na mreži?	Prije uporabe ove aplikacije provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s internetom.

9.2 Omogućavanje predviđanja niske razine glukoze tijekom noći

- 1** Pritisnite **Omogući** na kartici Predviđanje niske razine glukoze tijekom noći.
- 2** Pritisnite **Sljedeće** i uključite dugme za odabir obavijesti.
- 3** Unesite vrijeme i pritisnite **Gotovo**.
Odaberite vrijeme koje je najmanje 30 minuta nakon posljednjeg obroka i unosa inzulina u danu i prije spavanja.
- ☒ Prikazuje se zaslon potvrde. Pritisnite **U redu**.

Ovom značajkom identificiraju se ponavljajući glikemijski događaji koji se odvijaju tijekom dana ili tjedna (pon. – ned.).

Svaki dan vaši otkriveni obrasci iz posljednja 24 sata prikazani su ispod grafikona na početnom zaslonu.

Vizualiziraju se obrasci unutar raspona i izvan raspona. Prikaz obrazaca izvan raspona omogućuje poduzimanje provedivih koraka kako bi se oni spriječili u budućnosti.

Obrasci se prikazuju prema redoslijedu u kojem je na prvom mjestu na vrhu obrazac s najvećim zdravstvenim rizikom, kao što je obrazac vrlo niske glukoze ili niske glukoze.

Također možete postaviti podsjetnike na bilo koji od svojih otkrivenih obrazaca.

Svakog ponedjeljka aplikacija prikazuje sažetak svih obrazaca koji su otkriveni prethodni tjedan. Kako biste primili obavijest kada je sažetak spreman, pogledajte dio Omogućavanje obavijesti za tjedni sažetak.

Dodirnite ikonu Obrasci na donjoj navigaciji da biste napravili sljedeće:

Na kartici Aktualno na zaslonu Obrasci glukoze

- Pregledajte otkrivene obrasce i obrasce za koje su postavljeni podsjetnici.
- Dodirnite otkriveni obrazac kako biste vidjeli više informacija, uključujući sve povezane unose ugljikohidrata, inzulina i rezultata mjerenja glukoze u krvi u dnevniku aplikacije Accu-Chek SmartGuide. Dodirnite jedan dan za obrazac da biste vidjeli pojedinosti i informacije iz dnevnika za taj dan.
- Postavite da primite obavijest kada sažetak prošlog tjedna bude dostupan.

Na kartici Prošlo na zaslonu Obrasci glukoze

- Pogledajte one obrasce koji se više ne otkrivaju, navedene tako da je na prvom mjestu posljednji mjesec. Prošli obrasci stariji od 2 tjedna pohranjuju se zasebno do 6 mjeseci.

Kada prvi put pogledate zaslon Obrasci glukoze, prikazuje se pregled. Pročitajte zaslone kako biste bolje razumjeli kako značajka funkcionira.

10.1 Vrste obrazaca glukoze

U tablicama u ovom poglavlju navode se mogući obrasci i njihov pridruženi vremenski blok koji se može otkriti iz vaših podataka CGM-a.

U prvoj tablici prikazuju se vremenski blokovi i njihovo vrijeme početka i završetka.

Vremenski blok	Vrijeme početka	Vrijeme završetka	Vremenska zona
Noć	0:00	6:00	Lokalno vrijeme
Jutro	6:00	10:00	Lokalno vrijeme
Tijekom dana	10:00	20:00	Lokalno vrijeme
Večer	20:00	0:00	Lokalno vrijeme
Cijeli dan	0:00	0:00	Lokalno vrijeme

Vremenska oznaka prikazana za obrazac odražava vaše lokalno vrijeme kada je vremenska oznaka zabilježena. Prethodne vremenske oznake ne ažuriraju se ako se preselite u drugu vremensku zonu.

U sljedećoj tablici navedeni su mogući obrasci koje ova aplikacija može otkriti iz vaših podataka.

Zadane fiksne vrijednosti glukoze ove aplikacije ovdje se upotrebljavaju kao pragovi koji pokreću obrazac izvan raspona. Obrasci unutar raspona i izvan raspona nakon obroka pokreću se ciljnim rasponom koji postavite u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide.

Morate kontinuirano bilježiti svoje obroke u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide kako biste imali koristi od otkrivanja obrazaca povezanih s doručkom ili obrokom u ovoj aplikaciji.

Ikona Obrasci	Mogući obrasci	Opis
	Nizak (ujutro, danju, navečer, noću)	Glukoza ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L)
	Vrlo niska (ujutro, danju, navečer, noću)	Glukoza ispod 54 mg/dL (3,0 mmol/L)
	Dugotrajno niska (ujutro, danju, navečer, noću)	Glukoza ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L) dulje od 2 sata
	Svakodnevno više puta niska	Glukoza ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L) više puta u istom danu
	Vrlo visoka glukoza (ujutro, danju, navečer, noću)	Glukoza iznad 250 mg/dL (13,9 mmol/L)
	Visoka prije doručka	Glukoza iznad 130 mg/dL (7,2 mmol/L) Ova je vrijednost samo primjer. Vrijednost glukoze ovisi o nižoj ciljnoj vrijednosti koju ste postavili u aplikaciji Accu-Chek SmartGuide. Vremensko razdoblje: 06:00 – 10:00
	Visok (ujutro, danju, navečer, noću)	Glukoza iznad 180 mg/dL (10,0 mmol/L)
	Izvan raspona nakon obroka	Glukoza izvan ciljnog raspona nakon konzumacije obroka
	Unutar raspona prije doručka	Glukoza unutar ciljnog raspona prije konzumacije obroka Vremensko razdoblje: 06:00 – 10:00
	Unutar raspona	Glukoza unutar ciljnog raspona
	Unutar raspona na uzastopne dane	Glukoza unutar raspona tri ili više uzastopnih dana
	Unutar raspona nakon obroka	Glukoza unutar ciljnog raspona nakon konzumacije obroka

Ikona Obrasci	Mogući obrasci	Opis
	Visoka promjenjivost CGM-a	Razine glukoze variraju tijekom dana.
	Prekomjerna korekcija niske glukoze	Promjene razine glukoze od ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L) do iznad 250 mg/dL (13,9 mmol/L) unutar 3 sata.
	Prekomjerna korekcija visoke	Promjene razine glukoze od iznad 250 mg/dL (13,9 mmol/L) do ispod 70 mg/dL (3,9 mmol/L) unutar 3 sata.

10.2 Mogući uzroci obrazaca niskih i visokih vrijednosti glukoze

Sljedeća tablica sadrži moguće uzroke obrazaca niskih i visokih vrijednosti za osobu s dijabetesom tipa 1 ili 2. Imajte na umu da se uzroci možda neće prikazati za sve obrasce i tipove dijabetesa. U aplikaciji dodirnite svaki uzrok za više informacija.

Ikona	Uzrok
	Doziranje inzulina
	Mjesta injiciranja
	Hrana i piće
	Tjelesna aktivnost
	Djelovanje hormona
	Hormoni i bioritmovi
	Toplina
	Stres, spavanje i bolest

10.3 Postavljanje podsjetnika za obrazac glukoze

Postavljanje podsjetnika na obrazac omogućuje vam definiranje radnje koju želite poduzeti.

Uporabom podataka koje aplikacija prikuplja i znanja o vlastitom životnom stilu i ponašanju, možete ih primijeniti za bolju glikemijsku ravnotežu i izbjegavanje kritičnih situacija.

U bilo kojem trenutku možete otići na pojedinačni obrazac i tamo isključiti podsjetnik.

Nakon što se obrazac riješi, aplikacija ga automatski premješta na karticu Prošlo. Istodobno, ako je za obrazac postavljen podsjetnik, aplikacija uklanja podsjetnik.

- 1** Pritisnite **Obrasci** na donjoj navigaciji.
- 2** Pritisnite obrazac za koji želite primati podsjetnike.
- 3** Pritisnite Postavi **podsjetnik**.
- 4** Uključite dugme za odabir podsjetnika.
- 5** Odaberite dan i vrijeme te koliko često želite primati podsjetnik na obrazac. Dodirnite **Spremi**.
- 6** Pritisnite **Gotovo**.
- ☒ Prikazuje se zaslon potvrde. Pritisnite **U redu**.
Ponovite iste korake za svaki pojedinačni obrazac za koji želite dobiti podsjetnik.

10.4 Dodavanje napomene

Napomenu možete dodati samo na dane kada se pojavio obrazac. Ta će se napomena također pojaviti u vašem izvješću o obrascu.

- 1** Pritisnite **Obrasci** na donjoj navigaciji.
- 2** Pritisnite obrazac kojem želite dodati napomenu.
- 3** Pritisnite dan kada se obrazac pojavio.
- 4** Pritisnite **Dodaj** i unesite kratak opis.

10.5 Omogućavanje obavijesti za tjedni sažetak

Sažetak obrasca za prethodni tjedan generira se svakog ponedjeljka. Za primanje obavijesti kada taj sažetak bude dostupan:

- 1** Pritisnite **Obrasci** na donjoj navigaciji.
- 2** Pritisnite **Omogući** na kartici s tjednim sažetkom.
- 3** Uključite dugme za odabir obavijesti.
- 4** Pritisnite **Sljedeće**.
- 5** Pritisnite **Obavijesti me svaki dan** u i uredite vrijeme kada želite primiti obavijest.
- 6** Pritisnite **Sljedeće**.
- ☒ Prikazuje se zaslon potvrde. Pritisnite **U redu**.

Svoje odabire možete promijeniti u **Izbornik > Postavke obavijesti**.

Kada prvi put izvezete izvješće, upoznajte se s pregledom značajki na zaslonu. Dodirnite ikonu ⓘ kako biste se u bilo kojem trenutku vratili na pregled.

Izvješće možete izvesti izravno iz ove aplikacije. Imate mogućnost uključiti vaš ambulantni profil glukoze (AGP) i/ili obrasce za razdoblje od dva tjedna. Dijeljenje vašeg izvješća u PDF-u sa zdravstvenim radnikom nije teško. Provjerite ima li metoda kojom dijelite svoje osobne podatke, kao što je e-pošta, zaštite za zaštitu vaših podataka.


Izvoz izvješća

- 1** Pritisnite **Izbornik > Izvezi izvješće**.
- 2** Odaberite dvotjedno razdoblje za izvješće.
- 3** Odaberite sadržaj izvješća.
- 4** Pritisnite **Generiraj izvješće**.

- ☒ Prikazuje se vaše izvješće.

Možete podijeliti izvješće ili ga spremiti za kasniji pregled. Ako zatvorite generirano izvješće prije spremanja, ponovno ga generirajte i zatim spremite na željenu lokaciju.

Da biste vidjeli postavke svoje aplikacije i unijeli promjene, dodirnite **Izbornik** na donjoj navigaciji. Redovito provjeravajte postavke i ostale pojedinosti. Najnovije informacije pružit će vam najbolje iskustvo u uporabi ove aplikacije.

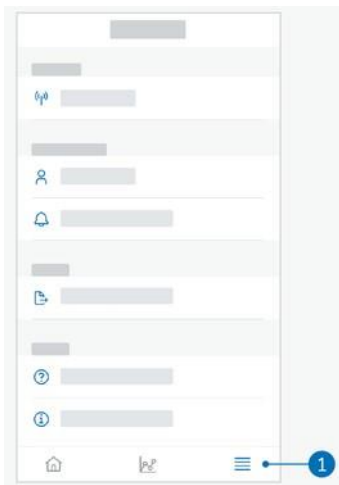

Uređivanje postavke obavijesti

- 1 Pritisnite **Izbornik > Postavke obavijesti**.
- 2 Prema potrebi uključite ili isključite dugme za odabir obavijesti.
- 3 Ako omogućite obavijest za tjedni sažetak obrazaca, prilagodite vrijeme ako je primjenjivo.
- 4 Pritisnite **Spremi**.

Uređivanje pojedinosti o računu

- 1 Pritisnite **Izbornik > Račun > Upravljanje računom**.
- 2 Dodajte ili ažurirajte potrebne informacije. Dodirnite **Spremi**.

Postavke privatnosti

- 1 Pritisnite **Izbornik > Račun > Postavke privatnosti**.

Zaslon Informacije o proizvodu

- 1 Pritisnite **Izbornik > Informacije o proizvodu**.

Odjava

- 1 Pritisnite **Izbornik > Račun > Odjava**.

Brisanje računa

- 1 Pritisnite **Izbornik > Račun > Izbriši moj račun**.
Provjerite želite li poduzeti tu radnju. Ako izbrišete svoj račun za Accu-Chek, izgubit će se svi podaci. Vaši podaci kasnije neće biti dostupni.
- 2 Pritisnite **Gotovo**.

13.1 Otklanjanje poteškoća

Kliknite na poveznice u nastavku za više informacija.

- Poruke o pogrešci predviđanja glukoze
- Iznimke predviđanja niske glukoze
- Poruke o pogrešci predviđanja niske glukoze tijekom noći
- Mogući uzroci obrazaca niske i visoke glukoze

13.2 Pregled obavijesti

Aplikacija komunicira s vama na različite načine.

Neke obavijesti služe samo za informativne svrhe. Pročitajte obavijest i dodirnite  kako biste je zatvorili.

U drugim obavijestima navode se dodatne radnje koje možete poduzeti. Pročitajte obavijest i odaberite željenu radnju.

Dok upotrebljavate aplikaciju možete naići na sljedeće različite vrste informativnih obavijesti:

- pomoć sa zadacima uvođenja
- informacije o vašoj trenutačnoj razini glukoze
- informacije o vašem predviđanju glukoze
- informacije o vašoj niskoj i visokoj glukozii
- informacije o različitim vrstama problema, primjerice s aplikacijom ili vašim mobilnim uređajem

Obratite nam se

Obratite se podršci za korisnike ako naidete na bilo kakve poteškoće, imate pitanja o radu aplikacije ili trebate više informacija o aplikaciji. Dodirnite **Izbornik > Obratite nam se**.

Prijava ozbiljnih incidenata

Za bolesnike/korisnike/treće strane u Europskoj uniji i zemljama s istim regulatornim režimom, ako se tijekom uporabe ovog uređaja ili kao posljedica uporabe dogodi ozbiljni incident, molimo da izvijestite proizvođača i svoje nacionalno tijelo.

Tiskane upute za uporabu

Obratite se službi podrške za korisnika ako želite tiskanu verziju ovih uputa za uporabu. Tiskana verzija besplatna je i bit će vam poslana u roku od nekoliko dana.

Preuzimanje uputa za uporabu

Ove upute za uporabu dostupne su za preuzimanje na **<https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>**.*

* preuzimanje može rezultirati potrošnjom podataka/naplatom

Hrvatska

Roche d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269a

10000 Zagreb, Hrvatska

SmartGuide korisnička podrška: 0800 805934

www.accu-chek.hr

Naziv proizvoda

Aplikacija Accu-Chek SmartGuide Predict

Vrsta aplikacije

Aplikacija za mobilne uređaje

Verzija aplikacije

Za više informacija o verziji aplikacije koju upotrebljavate dodirnite **Izbornik > Informacije o proizvodu**.

Podržani operacijski sustavi

Aplikacija je dostupna samo za određene operacijske sustave. Aplikaciju upotrebljavajte samo ako podržava operacijski sustav.

Za najnovije informacije o kompatibilnim operacijskim sustavima i njihovim verzijama pritisnite **<https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>**.

Podržani mobilni uređaji

Aplikaciju možete preuzeti samo ako mobilni uređaj podržava verziju operacijskog sustava iOS ili Android koja je potrebna za rad.

Za najnovije informacije o kompatibilnim mobilnim uređajima pritisnite **<https://tools.accu-chek.com/documents/dms/index.html>**.*

Podržani preglednici

Potreban vam je preglednik da biste stvorili Accu-Chek račun i prijavili se u aplikaciju. Ako već nemate instaliran preglednik, najprije ga morate preuzeti.

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Mozilla Firefox Focus
- Microsoft Edge
- Samsung Internet

Ova je aplikacija kompatibilna s preglednikom Safari na uređajima sa sustavom iOS.

Simbol	Opis
Navigacija aplikacijom	
	Početna
	Obrasci
	Izbornik
Navigacija zaslonom	
	Natrag
	Zatvori
	Kvačica
	Dodatne informacije
Izbornik aplikacije	
	Račun
	Veze
	Postavke obavijesti
	Izvoz izvješća
	Informacije o proizvodu

Simbol	Opis
	Obratite nam se
	Upute za uporabu
	Telefon
	E-pošta
Početni zaslon	
	Poruka upozorenja
	Predviđanje niske glukoze tijekom noći dostupno
	Predviđanje niske glukoze tijekom noći nije dostupno
	Predviđanje glukoze dostupno
	Predviđanje glukoze nije dostupno

Simbol	Opis
	Pogledajte elektroničke upute za uporabu
	Pažnja, slijedite sigurnosne napomene u uputama za uporabu ovog proizvoda.
	Datum proizvodnje
	Medicinski proizvod
	Proizvođač
	Označava ovlaštenog predstavnika u Švicarskoj
	Jedinstveni identifikator proizvoda
	Ispunjava uvjete važećih propisa EU

DATUM ZADNJE PROMJENE: 8. 2024.

ACCU-CHEK i ACCU-CHEK SMARTGUIDE zaštićeni su znakovi društva Roche.

App Store je uslužni žig društva Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

IOS je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak društva Cisco u SAD-u i drugim zemljama.

Android, Google Play i logotip Google Play zaštićeni su znakovi društva Google LLC.

Wi-Fi® je registrirani zaštićeni znak društva Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi nazivi proizvoda i žigovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

© 2024 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com

